



veterinary technology for life

Eickemeyer®

www.eickemeyer.ch

Telefon 071 788 23 13

Endoskopie erleben

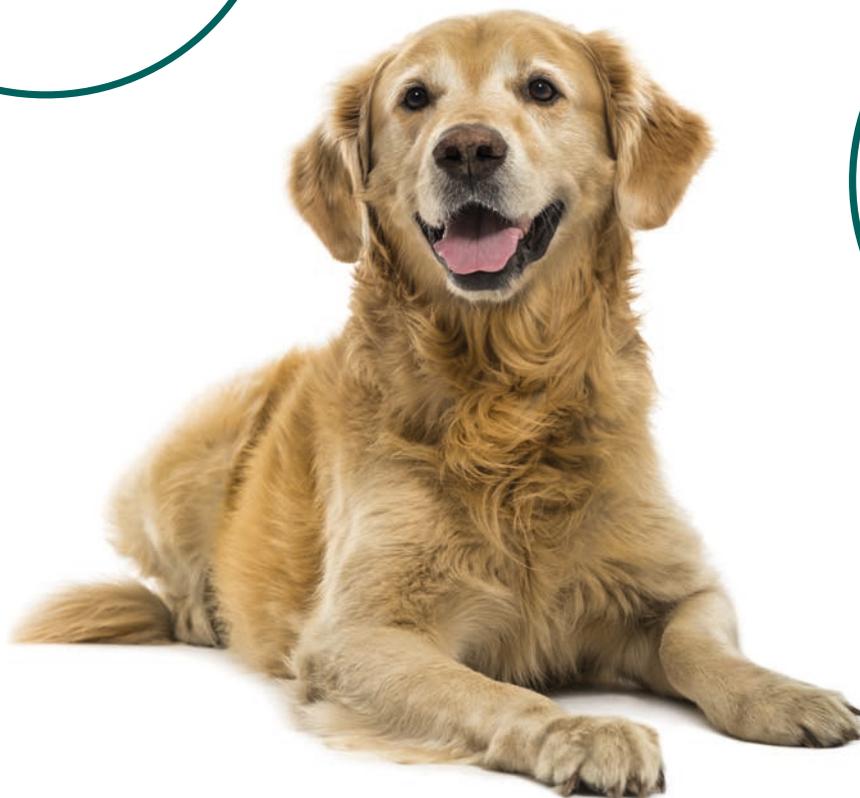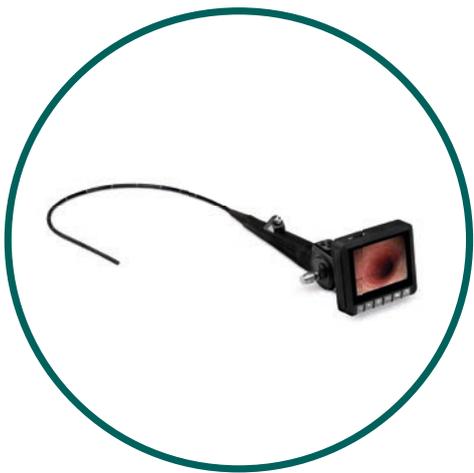

EICKVIEW 4-IN-1 ENDOSKOPIEMONITOR

Der EickView 4-in-1 Monitor ist ein echtes Multitalent für die Endoskopie. Das Gerät vereint ein grosses 22" Full-HD-Display, eine hochauflösende CCD-Kamera, eine leistungsstarke LED Kaltlichtquelle und die digitale Bilddatenspeicherung im einem einfach zu bedienenden und robusten System.



- ▶ Grosser 22" Full-HD-Bildschirm mit 1.920 x 1.080 Pixel
- ▶ Hochauflösende Full-HD-Kamera mit 1.920 x 1.080 Pixel
- ▶ Zoom-Adapter zur Einstellung der Brennweite und des Fokus
- ▶ Leistungsstarke LED Kaltlichtquelle mit 490.000 Lux Lichtintensität
- ▶ Länge Lichtleitkabel: 2,8 m
- ▶ Integrierte Bilddatenspeicherung auf SD-Karte
- ▶ Aufnahmeformate: MP4, JPG
- ▶ HDMI-Ausgang
- ▶ Inkl. Fernbedienung
- ▶ Abmessungen (in cm): B 56 x H 38 x T 15
- ▶ Gewicht: 15 kg

306105



KLEINE MULTIFUNKTIONSEINHEIT

Die Einheit mit Klappmonitor, Kamerakopf, LED-Lichtquelle, TV-Adapter sowie HD-Rekorder besteht vor allem durch ihre kompakte Bauweise und ist durch die einfache Handhabung das optimale Einsteigermodell.

- ▶ Für starre Endoskope
- ▶ Videos können über den USB-Anschluss direkt auf einem USB-Stick gespeichert werden
- ▶ Ausschliesslich Netzbetrieb
- ▶ Inkl. Fusschalter

Technische Daten Monitor

- ▶ 10" (25,4 cm) LCD-Display
- ▶ Auflösung: 1.280 x 800 Pixel

Technische Daten LED Lichtquelle

- ▶ Helligkeit: ≥ 195.000 Lux
- ▶ Farbtemperatur: ≥ 6.500 Kelvin (liefert natürlich weisses Licht)

Technische Daten Kamerakopf

- ▶ 1/3 CCD Kamera
- ▶ Auflösung: 795 x 596 Pixel (PAL), 811 x 508 Pixel (NTSC)
- ▶ 700 Linien

308185



LAPAROSKOPIESET FÜR HUNDE UND KATZEN

**ONLINE
BESTELLEN**
www.eickemeyer.ch

Die minimalinvasive Chirurgie hat sich auch in der Veterinärmedizin zum „Goldstandard“ entwickelt. Mit dem Laparoskopieset für Hunde und Katzen sind Sie gut gerüstet, um Ihren Patienten eine schonende Behandlung zukommen zu lassen. Dieses Set ermöglicht Ihnen minimalinvasive Eingriffe in den Bereichen der Nebennieren, Gallenblase, Lunge, Darm, Mediastinum, und Fortpflanzungstrakt.

EickView 4-in-1 Endoskopiemonitor

- ▶ Mit integrierter CCD-Kamera und LED Kaltlichtquelle und Kaltlichtkabel (siehe Seite 2)

306105

Starres Endoskop

- ▶ Vorausblick-Optik 30°
- ▶ Ø 5 mm
- ▶ Länge: 328 mm

305004

Trokarhülse (3x im Set)

- ▶ Kugelhahn mit Luer-Lock-Anschluss zum Saugen und Insufflieren
- ▶ Mit Gewinde
- ▶ Ø innen: 5,5 mm

30495000

Sicherheitstroker, Ø 5,5 mm (3x im Set)

- ▶ Länge: 16 cm

30495031

Veress-Kanüle, Ø 2 mm

- ▶ Länge: 10 cm

305002

Universal-Fasszange mit Kunststoffgriff, Ø 5 mm

- ▶ Drehbar, mit Anschluss für unipolare Koagulation
- ▶ Länge: 36 cm

30495016

Bipolare Koagulationsfass- und Schneidezange EickCut

- ▶ Arbeitslänge: 32 cm
- ▶ Autoklavierbar
- ▶ Austauschbare Klinge

30495013

Klingen für EickCut Zange (5 Stück)

- ▶ Zum einmaligen Gebrauch

30495014

CO₂-Insufflator

- ▶ Druckwerte von 5–25 mmHg einstellbar
- ▶ 3 verschiedene Flussraten einstellbar: 10 l/min; 20 l/min; 30 l/min

305261

Elektrochirurgiegerät EickTron 160 W

- ▶ Vielseitig verwendbar: monopolar und bipolar
- ▶ Sehr einfach in der Bedienung, da mikroprozessorgesteuert
- ▶ Leistung lässt sich über Fuss- oder Handschalter regulieren
- ▶ Max. Output: 160 W (schneiden), 100 W (koagulieren), 60 W (bipolar)
- ▶ Abmessungen (in cm): H 10,4 x B 25,4 x T 28,8

323135

Bipolarer Anschlussadapter

- ▶ Für 323135 EickTron 160 W

323139

Bipolares Anschlusskabel

- ▶ Für Instrumente mit Euro-Flachstecker
- ▶ Für bipolare Pinzetten

323106

Set komplett

306033


Endoskopie-Wagen (optional)

306160

Knotenschieber mit Schlitz (optional)

- ▶ Länge: 330 mm, Ø 4,5 mm

305040

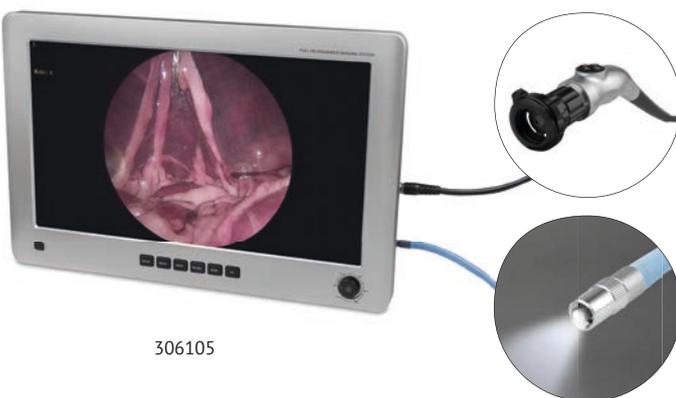

306105



30495000



305004



305002



30495016



30495013



305261



323139



30495013



30495016



305261



323135

EICKCUT BIPOLARE KOAGULATIONSFASS- UND SCHNEIDEZANGE

Die bipolare Koagulations- und Schneidezange EickCut ist das Produkt aus der Symbiose von Koagulationszange und Schneidezange. Das Alleinstellungsmerkmal der EickCut-Zange besteht vor allem darin, dass sie nicht, wie die bisher am Markt bekannten Zangen für den Einmalgebrauch, sondern für den Mehrfachgebrauch konzipiert ist. Sie ist komplett zerlegbar und kann somit auch autoklaviert und aufbereitet werden. Lediglich die Schneideklingen müssen von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Ausserdem ist die EickCut-Zange an alle gängigen Elektrochirurgie-Geräte anschliessbar.

- ▶ Ø aussen: 5 mm
- ▶ Arbeitslänge: 32 cm
- ▶ 360° drehbarer Schaft
- ▶ Bipolarer Euro-Stecker
- ▶ Mit Kunststoffhandgriff
- ▶ Autoklavierbar
- ▶ Austauschbare Klinge

30495013

Klingen für EickCut Zange

- ▶ Zum einmaligen Gebrauch
- ▶ 5 Stück pro Packung

30495014



EICKEMEYER® LAPAROSKOPIE TISCHAUFSATZ

Tischaufsatz zum einfachen Positionieren, Fixieren und Ausbinden während der Laparoskopie

- ▶ In Längsachse beidseitig stufenlos kippbar
- ▶ Viele Fixiermöglichkeiten
- ▶ Einfacher Auf- und Abbau
- ▶ Leicht zu reinigen

EICKEMEYER® Laparoskopie Tischaufsatz für Hunde

- ▶ Länge: 136 cm

305100



EICKEMEYER® Laparoskopie Tischaufsatz für Katzen

- ▶ Zusätzlich auch in Querachse stufenlos kippbar
- ▶ Länge: 73 cm

305110



EICKVIEW KOMPAKT ENDOSKOP-SET

ONLINE
BESTELLEN
www.eickemeyer.ch

Das speziell entwickelte EickView Kompakt Endoskop bietet durch seinen geringen Aussendurchmesser und den integrierten Arbeitskanal die optimale Lösung für die Rhino-, Tracheo- und Vaginoskopie bei Kleintieren. Die neue verschraubbare Otoskopierschutzvorrichtung macht das Endoskop zudem zum idealen Instrument für die Untersuchung des äusseren Gehörgangs und des Trommelfells.

- ▶ Perfekte Verbindung durch homogenes und minimalinvasives Distalende durch Verschmelzung von Arbeitsschaft und Endoskop
- ▶ Höchste Mobilität durch autarke Arbeitsweise der aufschraubbaren LED-Akku-Lichtquelle
- ▶ Keine Schmutzablagerung durch homogenes Distalende
- ▶ Integrierter Arbeitskanal: Ø 1,3 mm
- ▶ Ø aussen: 3,8 mm
- ▶ Arbeitslänge: 14 cm
- ▶ Blickrichtung: 30°
- ▶ Öffnungswinkel: 90° (Weitwinkel)
- ▶ Fremdkörperzange: Ø 1,0 mm, L 25 cm
- ▶ Langlebiger Akku/Ersatz-Akku mit einer Betriebszeit von je 4 Std.
- ▶ 3 verstellbare Lichtstufen
- ▶ Zwei integrierte Spülhähne ermöglichen eine stetige Insufflation und Versorgung mit Spülflüssigkeit
- ▶ 3 verschiedene Anschlüsse: Storz, Wolf, ACMI
- ▶ Okular: DIN-Okular erlaubt reibungslosen Anschluss an alle gängigen C-Mount-Kameras
- ▶ Lieferumfang: Endoskop inkl. verschraubbare Otoskopierschutzvorrichtung, LED-Handlichtquelle, Fremdkörperzange, Ladegerät, Ersatz-Akku, 2 Reinigungsbürsten, Transportkoffer

306122



EICKVIEW ULTRA KOMPAKT ENDOSKOP-SET

Das EickView Ultra Kompakt mit 3 mm Aussendurchmesser bildet die neue Generation von multifunktionellen starren Endoskopen und eignet sich ideal für alle HNO-Anwendungen sowie zur Tracheo- und Vaginoskopie.

- ▶ Homogenes und minimalinvasives Distalende durch Verschmelzung von Arbeitsschaft und Endoskop
- ▶ Keine Schmutzablagerung durch homogenes Distalende
- ▶ Leichter reibungsloser Zugang durch extrem geringen Aussendurchmesser
- ▶ Integrierter Arbeitskanal ermöglicht Fremdkörperextraktionen und Biopsien im Handumdrehen
- ▶ Arbeitskanal Ø: 1,3 mm
- ▶ Ø aussen: 3 mm
- ▶ Arbeitslänge: 11 cm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Öffnungswinkel: 90° (Weitwinkel)
- ▶ Endoskop einlegbar
- ▶ Spülhähne: Zwei integrierte Spülhähne ermöglichen eine stetige Insufflation und Versorgung mit Spülflüssigkeit
- ▶ Lieferumfang: Endoskop, LED-Handlichtquelle, Fremdkörperzange, Ladegerät, Ersatz-Akku, 2 Reinigungsbürsten, Transportkoffer

306112



EICKVIEW HD LED USB-VIDEOENDOSKOPE

Das neue EickView HD Videoendoskop-System können Sie nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen zusammenstellen.

EickView HD Videoprozessor

Der EickView HD Videoprozessor stellt die Basis Ihres Endoskop-Systems dar. Die leistungsstarke LED-Lichtquelle ermöglicht eine optimale Ausleuchtung in jeder Lage. Durch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten am Videoprozessor können Sie die Bildqualität an Ihre Ansprüche und Anforderungen anpassen. Der neue HbE-Modus ermöglicht zusätzlich eine verbesserte Darstellung von Gefässen. Standbilder können direkt am EickView HD Videoprozessor auf einem USB-Speichermedium gespeichert werden. Die Bilddaten können auch an einen bereits vorhandenen PC übertragen werden.

306167

EickView HD Videoendoskope

Die EickView HD Videoendoskope liefern durch die weiter verbesserten Videochips noch brillantere Bilder bei gleichbleibender Baugrösse. Die Hauptanwendungsgebiete der EickView HD Videoendoskope sind Broncho- und Gastroskopie. Durch die Vielzahl an verfügbaren Endoskopgrössen können Sie Untersuchungen vom Kleintier bis hin zum Pferd durchführen.


Technische Daten Endoskope

- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Distalende beinhaltet 1 CMOS-Kamera-Chip, 2 Lichtleiter, Arbeitskanal, Linsenspüldüse
- ▶ Lieferumfang: Videoendoskop EickView, Drucktester, 2 Reinigungsbürsten, Reinigungsset, Transportkoffer

EickView PRO HD Upgrade

Mit dem EickView PRO HD Upgrade machen Sie aus dem Videoprozessor eine sehr mobile Endoskopie-Einheit durch die Sie Zugang zu weiteren endoskopischen Disziplinen wie Arthroskopie, Rhinoskopie, Otoskopie etc. erhalten. Das Windows 10 Tablet mit kontrastreichem 12,3 Zoll PixelSense Display (2.736 x 1.824 Pixel) dient Ihnen sowohl als Display mit einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden, als auch zur Speicherung von Standbild- und Videoaufnahmen. Weitere Vorteile des Upgrades sind die noch einfachere zu bedienende Video-Software, Tastatur und Maus zur einfachen Patienten- und Bildverwaltung sowie ein USB Hub zum Anschluss einer separat erhältlichen USB Kamera.

30616701

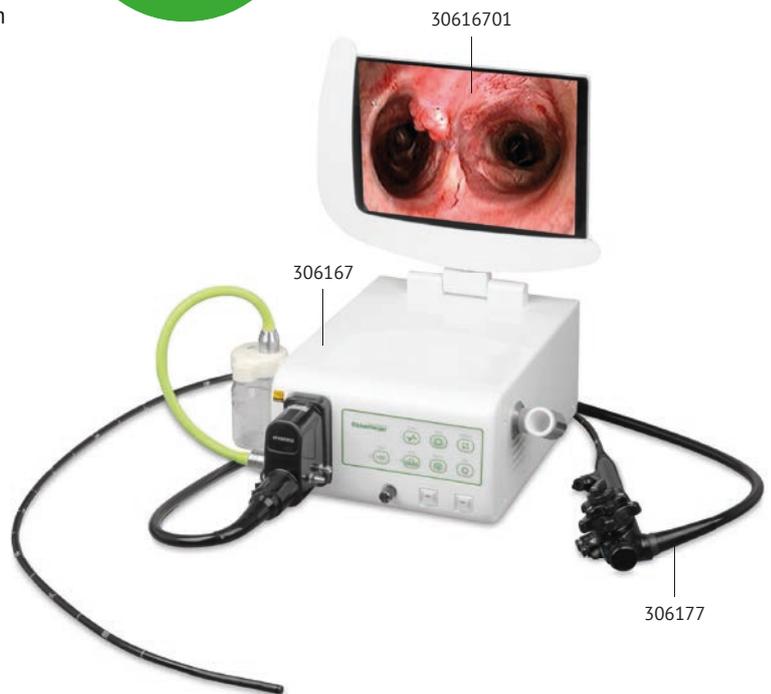

EickView HD LED USB-Videoendoskope							
Art. Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge	Ø aussen	Arbeitskanal	Tiefenschärfe	Sichtfeld	Abwinklungen
306177	EickView 60 HD Endoskop	60 cm	3,5 mm	1,2 mm	3 – 50 mm	120°	oben/unten 160° / 130° rechts/links 0°
306178	EickView 100 HD Endoskop	100 cm	5,8 mm	2,0 mm	3 – 50 mm	120°	oben/unten 210° / 90° rechts/links 100°
306168	EickView 150 HD Endoskop	150 cm	8,5 mm	2,0 mm	5 – 100 mm	≥ 140°	oben/unten 210° / 90° rechts/links 100°
306169	EickView 150L HD Endoskop	150 cm	9,2 mm	2,8 mm	5 – 100 mm	≥ 140°	oben/unten 210° / 90° rechts/links 100°
306170	EickView 300 HD Endoskop	300 cm	13,0 mm	3,2 mm	5 – 100 mm	≥ 140°	oben/unten 210° / 90° rechts/links 100°

Die EickView LED-Videoendoskope sind durch ihre äusserst kompakten Dimensionen die perfekte Lösung zur Broncho-, Gastro-, Uretero- und Vaginoskopie bei Hund und Katze sowie zur Untersuchung der oberen Atemwege beim Pferd. Die Geräte arbeiten völlig autark, da die leistungsstarke LED-Lichtquelle und die Kamera direkt im distalen Ende der Endoskope integriert sind. Darüber hinaus ermöglicht der klapp- und drehbare 3,5" Monitor sowohl die direkte Video- und Bildwiedergabe als auch Speicherung per SD-Karte. Ausserdem sind die EickView LED-Videoendoskope an einen separaten Monitor anschliessbar.

Technische Daten

- ▶ Klappbarer 3,5" Monitor zur Video- und Bildwiedergabe
- ▶ Aufnahme und Archivierung auf SD-Karte
- ▶ Dateiformate: JPG, AVI
- ▶ Integrierte LED-Lichtquelle
- ▶ Akku mit bis zu 3 Stunden Betriebszeit
- ▶ USB-Anschluss und Video-out
- ▶ Tiefenschärfe: 5 – 80 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Blickwinkel: 110°



306166

EickView tragbare LED-Videoendoskope					
Art. Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge	Ø aussen	Arbeitskanal	Abwinklungen
306009	EickView 60S Endoskop	60 cm	3,3 mm	1,2 mm	nach oben 180° nach unten 130°
306011	EickView 60 Endoskop	60 cm	4,2 mm	1,3 mm	nach oben 180° nach unten 130°
306010	EickView 70 Endoskop	70 cm	6,0 mm	2,0 mm	nach oben 180° nach unten 130°
306166	EickView 100E Endoskop	100 cm	8,0 mm	2,8 mm	nach oben 150° nach unten 130°
306164	EickView 150E Endoskop	150 cm	8,0 mm	2,8 mm	nach oben 130° nach unten 130°

ZUBEHÖR EICKVIEW ENDOSKOPE

		EickView 60/60S/60 HD	EickView 70	EickView 100 HD/150 HD	EickView 100E/150E/150L HD	EickView 300 HD
Biopsiezange	Art. Nr.	306311	306314	306318	306316	306330
	Länge (cm)	120	120	230	230	350
	Ø (mm)	1,0	1,8	1,8	2,3	2,3
Fremdkörper- zange	Art. Nr.	306211	306214	306217	306216	306230
	Länge (cm)	120	120	230	230	350
	Ø (mm)	1,0	1,8	1,8	2,4	2,4
Fremdkörper- greifer	Art. Nr.	306340	306346	306342	306343	306344
	Länge (cm)	120	120	230	230	350
	Ø (mm)	1,0	1,8	1,8	2,3	2,3
Hakenfasszange	Art. Nr.	306431	306435	306434	306432	306433
	Länge (cm)	120	120	230	230	350
	Ø (mm)	1,0	1,8	1,8	2,3	2,3
Steinfänger	Art. Nr.	306336	306332	306331	306329	306339
	Länge (cm)	120	120	230	230	350
	Ø (mm)	1,0	2	2,0	2,3	2,6
	Korbgrösse (mm)	25	50	90	90	90
	Fäden	4	6	6	6	6
Polypektomie- schlinge	Art. Nr.		306426	306422	306423	306424
	Länge (cm)		120	230	230	350
	Ø (mm)		1,8	1,8	2,4	2,4
Zytologiebürste	Art. Nr.	306415	306416	306417	306418	306419
	Länge (cm)	120	160	230	230	350
	Ø (mm)	1,0	1,8	1,8	2,6	3,0
Reinigungs- bürste	Art. Nr.	306444	306440	306441	306442	306443
	Länge (cm)	120	160	230	230	350
	Ø (mm)	2,2	3,0	3,0	5,0	7,0
Schlauch zur Schleimproben- entnahme	Art. Nr.	306353	30610304	306352	306352	
	Länge (cm)	100	100	350	350	
	Ø (mm)	1,1	1,7	1,8	1,8	



306311



306211



306340



306336



306415